


HANDYVAP
VAP-01
STEAM INHALER

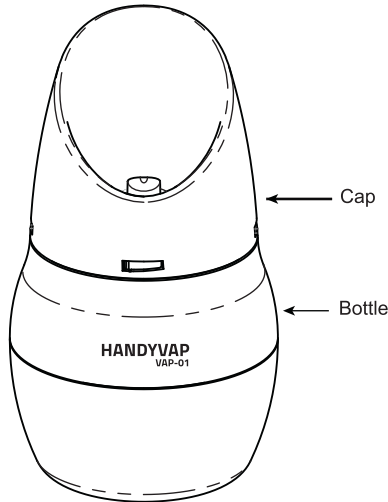

Features:

- 100% Plastic body to prevent shocks
- Cord 1.5 Meter Length
- Double wall body to avoid any injury due to hot water while handling the machine.
- Special Locking to avoid accidental opening to safeguard from spilling hot water and burn.

Few tips for safety



Keep unit straight while in use or filled with hot water



Never leave unit unattended with kids to avoid burn injury due to hot water



Never plug in wet pins always keep it dry and away from water



Don't pull wire to unplug machine, switch off & catch the plug and pull out.

CAUTION

- Use soft drinking water only.
- Remove plug from power outlet before opening to prevent risk of electric shock.

Please Note: Picture for illustration purpose only Actual product and accessories may vary.

History:

Steam has been used for hundreds of years as a therapy for treating congestion, cold and various ailments of the nose, throat and upper respiratory area.

Steam inhalers today have very convenient, it instantly create steam that can be inhaled for the best effect.

Steam inhalers are very easy to use. They have a small plastic receptacle for water and need to be plugged in to instantly produce steam .

Doctors all over the world recommend steam as a natural decongestant for anyone who is suffering from congestion, cold or having trouble with sinusitis.

A steam inhaler essentially gives off a fine mist of steam that easily reaches the inner areas of the nose, sinuses and the throat. This steam provides effective and quick relief to the person who inhales it.

The steam when it reaches the upper respiratory system relieves inflammation and congestion. It moistens dry nasal passages, and thins and loosens thick mucous, so that the congestion gets cleared more easily. When you inhale the steam it also relaxes the muscles and relieves coughing to an extent.

A Steam inhaler provides instant steam and is a safe, drug free and convenient way give fast and natural relief people suffering from colds, congestions and sinus congestion, laryngitis or allergies. It provides the right amount of humidity where it is required in the upper respiratory area.

Steam inhalers are very effective for relieving the inflammation and congestion of your sinuses, relieving the symptoms of dry mucous membrane and keeping your nasal passages moist and clean.

Useful for:

Useful for steam inhalation for treatment of :

- Cold • Bronchitis • Laryngitis.
- Sinus • Asthama
- Aroma Therapy & some Ayurvedic treatment.

How To Use:

- Open the cap by moving it anti-clockwise.
- Fill the bottle upto half level & move it clockwise to close the cap.
- Put the plug in socket & switch on power, wait for some time.
- Vapor start coming uniformly, then take your nose close to vapor and inhale.
- When finish inhalation switch off the power.
- Ensure the water level is not below minimum level.

Technical Features:

Electrical Requirements	220 - 240 V ~ 50/60Hz
Electrical Shock Protection	Class II, Type B
Dimensions // Weight	100mm x 100mm x 180mm, 250g approximate
Operating requirements	Temperature: min. +5° C – max 40°C, Humidity: 15 – 95% RH non condensing Pressure: 700 hPa, max 1060 hPa
Ingress protection	IP21
Storage Temperature Range	Temperature: min. -20° C – max 70°C, Humidity: 5 – 95% RH Non-Condensing Pressure: 700 hPa, max 1060 hPa

WARNING :

Although safe to use, it is not recommended to use the device with very hard water (non-drinkable). It will produce excessive (practically un-bearable) steam.

Mfg. By

MEDTECH LIFE PRIVATE LIMITED

Regd. address : B6,Byculla Service Industries, D.K.Marg, Sussex Road, Byculla (East), Mumbai 400027, Maharashtra, INDIA.


Customer Care No.+91 72080 88720
E-Mail:support@medtechlife.com
Website : www.medtechlife.com



Plot No. 05, Morai Industrial Park, S.No. 315/5, Morai,Valsad, Gujarat-396185, INDIA

An ISO 13485
Certified Company

हैंडीवैप वैप-01 स्टीम इन्हेलर

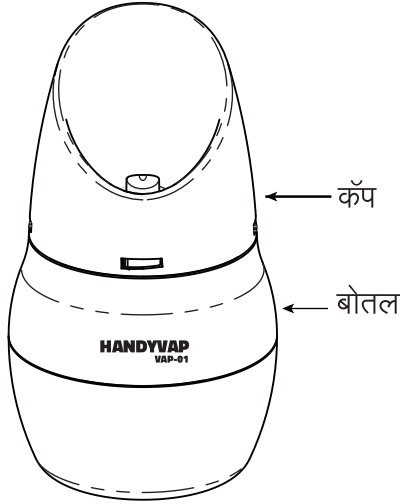

इतिहास:

नाक बंद होने, सर्दी लगने तथा नाक, गले और श्वसन तंत्र की कई बीमारियों के उपचार के लिए भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है।

आजकल बहुत ही सुविधाजनक स्टीम इन्हेलर्स उपलब्ध हैं। तुरन्त स्टीम/भाप पैदा करते हैं, जिन्हें तुरन्त सांस द्वारा अंदर लेकर उत्तम प्रभाव पाए जा सकते हैं।

स्टीम इन्हेलर्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इनमें पानी के लिए प्लास्टिक का छोटा पात्र होता है और तुरन्त स्टीम पैदा करने के लिए बस इसके प्लग को बिजली के सॉकेट में डालना पड़ता है।

बंद नाक, सर्दी या साइनुसाइटिस से राहत पाने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर नैचुरल डीकॉन्जेस्टेंटके रूप में स्टीम/भाप लेने की सिफारिश करते हैं।

स्टीम इन्हेलर भाप की एक बढ़िया फुहार देता है जो कि नाक, साइनुसेस और गलें के अंदरूनी हिस्से तक आसानी से पहुंच जाता है। यह भाप उस व्यक्ति को शीघ्रता से असरदार राहत दिलाती है जो इसे नाक से अंदर लेता है।

भाप जब श्वसन तंत्र तक पहुंचती है तो नाक को जलन-सूजन तथा बंद होने की समस्या से राहत दिलाती है, यह सूखे नासिका मार्गों को नम करती है तथा गाढ़े बलगम को पतला और ढीला करती है, ताकि बंद नाक आसानी से खुल सके। श्वसन मार्ग से भाप को अंदर लेने पर वहां की मांसपेशियां भी शिथिल पड़ती है जिससे कुछ हद तक खांसी से भी आराम मिलता है।

स्टीम इन्हेलर तुरन्त स्टीम यानी भाप प्रदान करता है तथा इसमें कोई ड्रग नहीं है और यह सर्दी बंद नाक और साइनस, लेराइजिटिस या एलर्जियों से पीड़ित लोगों को शीघ्र तथा कुदरती तरीके से राहत दिलाने का एक सुविधाजनक तरीका है। यह श्वसन तंत्र में, जहां नमी की आवश्यकता होती है, उसकी सही मात्रा उपलब्ध कराता है।

स्टीम इन्हेलर्स आपको साइनस की जलन-सूजन का जकड़न से राहत दिलाने तथा सूखी बलगम के लक्षणों को मिटाने तथा नाक को खोलने व साफ रखने में काफी असरदार होते हैं।

उपयोगिता:

सांस द्वारा स्टीम/भाप का लेना इनके उपचार में उपयोगी होता है:

- सर्दी
- ब्रान्कोसाइटिस
- लेराइन्जाइटिस
- साइनस
- अस्थमा
- अरोमा थेरेपी तथा कुछ आयुर्वेदिक उपचार।

इस्तेमाल करने का तरीका:

- घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में घुमाकर कैप खोलें।
- बोतल को आधा भरें और घड़ी के चलने की दिशा में घुमाकर ढक्कन को बंद करें।
- प्लग को सॉकेट में डालें और बिजली के स्विच को चालू करें, कुछ देर इंतजार करें।
- भाप एक समान रूप से आना शुरू होगी, तब अपनी नाक को भाप के नजदीक ले जाएं और उसे अंदर खींचें।
- इन्हेलेशन समाप्त होने पर बिजली के स्विच को बंद कर दें।
- सुनिश्चित करें कि पानी का लेवल न्यूनतम लेवल के नीचे नहीं है।

तकनीकी विशेषताएं:

बिजली की आवश्यकताएं	२२० – २४० वोल्टेज ~ ५०/६० हर्ट्ज
विद्युत आघात संरक्षण	क्लास II, टाइप बी
डाइमेंशन // वजन	१०० x १०० x १८० एम एम २५० ग्रॅम अनुमानित
संचालन संबंधी आवश्यकताएं	तापमान मि. +५ डिग्री सेल्सीयस – अधिकतम : ४० डिग्री सेल्सीयस, आर्द्रता : १५-९५% आरएच गैर संघनकदबाव : ७०० एचपीए, अधिकतम : १०६० एचपीए
प्रवेश सुरक्षा	IP21
स्टोरेज तापमान रेंज	तापमान मि. +२० डिग्री सेल्सीयस – अधिकतम : ७० डिग्री सेल्सीयस, आर्द्रता : ५-९५% आरएच गैर संघनकदबाव : ७०० एचपीए, अधिकतम : १०६० एचपीए

विशेषताएं:

- १००% प्लास्टिक बॉडी जिससे बिजली के झटके न लगे
- १.५ मीटर लंबा तार
- डबल वॉल बॉडी ताकि मशीन का इस्तेमाल करते समय गर्म पानी से जख्मी न हों
- स्पेशल लॉकिंग जिससे गर्म पानी के अचानक छलकने और जलने से सुरक्षा मिले

सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव



यूनिट को इस्तेमाल के दौरान या गर्म पानी से भरे होने पर सीधा रखें



इस्तेमाल के दौरान यूनिट को छोड़कर इधर-उधर न जाएं, क्योंकि इसके गर्म पानी से बच्चे जख्मी हो सकते हैं।



गीले भिन्स को कभी सॉकेट में न लगाएं, हमेशा इसे सूखा और पानी से दूर रखें।



मशीन का प्लग कभी भी तार को खींचकर न निकालें, इसके स्विच को ऑफ करके प्लग को पकड़ कर बाहर निकालें।

सावधान

- मिठे पीने के पानी का ही उपयोग करें
- बिजली के झटके लगने के खतरे को रोकने के लिए खोलने से पहले पावर आउटलेट से प्लग निकालें

कृपया ध्यान दें: चित्र केवल उद्देश्यों के लिए है। वास्तविक उत्पाद और सामान भिन्न हो सकते हैं।

चेतावनी

वैसे उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, यह बहुत कठिन पानी (गैर-पीने योग्य) के साथ डिवाइस का उपयोग करने के लिए सिफारिश नहीं है। यह अत्यधिक (व्यावहारिक रूप से असहनीय) भाप का उत्पादन करेगा।

मेडटेक लाइफ प्राइवेट लिमिटेड

बी ६, भायखला सर्विस इंडस्ट्रीज,
डी. के. मार्ग भायखला, मुंबई ४०००२७, भारत.
ग्राहक सेवा नं. : +९१ ७२०८० ८८७२०
ईमेल: support@medtechlife.com
वेबसाइट: www.medtechlife.com



प्लॉट नं. ०५, मोराई इंडस्ट्रीअल पार्क,
एस. एन. नं. ३१५/५, मोराई,
वलसाड, गुजरात-३९६१८५, भारत.

एक ISO 13485
प्रमाणित कंपनी